

## Poštou jste obdrželi balíček obsahující:

- 1 Tlakoměr
- 2 Mobilní telefon
- 3 Nabíjecí zdroj pro mobilní telefon
- 4 Tento návod
- 5 Pacientský deníček
- 6 Obálku pro zpětné odeslání balíčku



## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



Při vyzvednutí balíčku na poště stvrzujete podpisem převzetí celého zařízení.

Baterii mobilního telefonu je nutné udržovat nabitou. Nabíjejte telefon pouze přiloženou nabíječkou.

Pro odeslání záznamů nejsou potřebné žádné zásahy do nastavení telefonu.

Mobilní telefon ani tlakoměr nejsou vodě odolné. Chraňte je proti poškození!

Po ukončení monitorace vložte do obálky **tlakoměr, mobilní telefon, nabíječku, pacientský deníček** a pečlivě zalepenou podejte na poště k přepravě.  
– **Odeslání je zdarma.**


Pro ukončení vyšetření Vás budeme telefonicky kontaktovat.

**Prostudujte si prosím pečlivě návod a při jakýchkoli pochybnostech nás neváhejte kontaktovat na tel: +420 724 706 524.**

**Instruktažní videa na internetu! [www.mdt.cz](http://www.mdt.cz)**



[www.mdt.cz](http://www.mdt.cz)

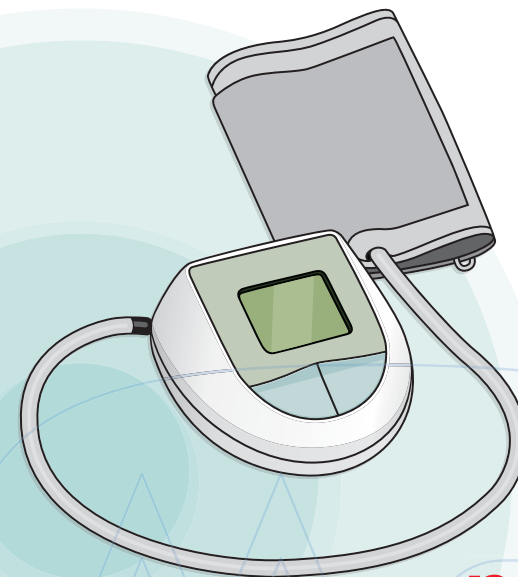

# návod

a důležité informace pro použití

TLAKOMĚŘ

> s automatickým přenosem dat

## návod – bod 1

### Zapnutí mobilního telefonu



displej  
zapnutého  
telefonu

Zapněte mobilní telefon tlačítkem nvrchu nebo na boku telefonu.


Zapnutí může chvíli trvat. Na displeji se objeví úvodní obrazovka s logem Mdt.

**TIP:** Po minutě displej telefonu automaticky zhasne. Chcete-li ověřit, že je telefon zapnutý, krátce stiskněte tlačítko nvrchu telefonu (viz obrázek) a displej se rozsvítí. Pokud se displej nerozsvítí, telefon je vybitý.

## návod – bod 2

### Měření tlaku

Položte paži dlaní směrem vzhůru na rovný povrch před sebe. Umístěte manžetu okolo holé paže 1–2 cm nad loktem. Manžetu otočte tak, aby šipka směřovala k prostředníčku. **Poté stiskněte tlačítko start.** V průběhu měření se nehýbejte, nemluvte ani nemanipulujte se zařízením.

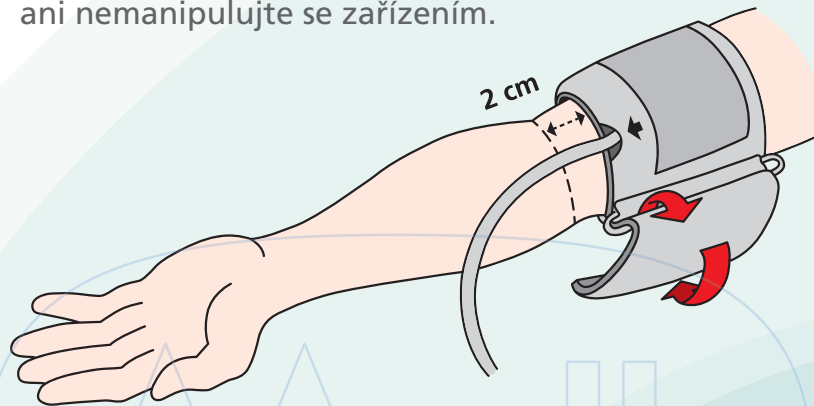

## návod – bod 3

### Odeslání záznamů

Po každé nahrávce se tlakoměr automaticky spojuje s mobilním telefonem, přes který data odesílá. Proto je nutné, abyste zapnutý mobilní telefon měli vždy v blízkosti tlakoměru.

## Pokud se na displeji tlakoměru objeví:

### 1) Err 01

#### A/ Pohybové artefakty:

zopakujte měření. Při měření nemluvte a nepohybujte se!

#### B/ Chyba manžety:

zopakujte měření po 10 sekundách.

### 2) Err 02

Sundejte a opět nasadte manžetu podle obrázku. Zopakujte měření.

### 3) Err 03

Zopakujte měření.

### 4) Err 04

Vyměňte baterie. (2xAA)

**Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás na tel.:**

**+420 724 706 524**

**Instruktažní videa na internetu! [www.mdt.cz](http://www.mdt.cz)**