




Vážený pane, Vážená paní,
příložený EKG záznamník PocketECG je určený pro dlouhodobý záznam a automatický přenos Vašeho EKG. Získaný EKG záznam pomůže stanovit příčinu Vašich obtíží, nebo ověří dlouhodobý efekt zákroku, který jste podstoupil(a). To je klíčové pro Vaši další úspěšnou léčbu.

Prostudujte si prosím pečlivě tento návod.

Od lékaře jste obdrželi balíček obsahující:

- ❶ Záznamník PocketECG s patientským EKG kabelem
- ❷ Pouzdro na nošení záznamníku
- ❸ Nabíječku baterií
- ❹ 2 nabité baterie
- ❺ Tento návod
- ❻ Nalepovací elektrody
- ❼ Obálku pro zpětné odeslání

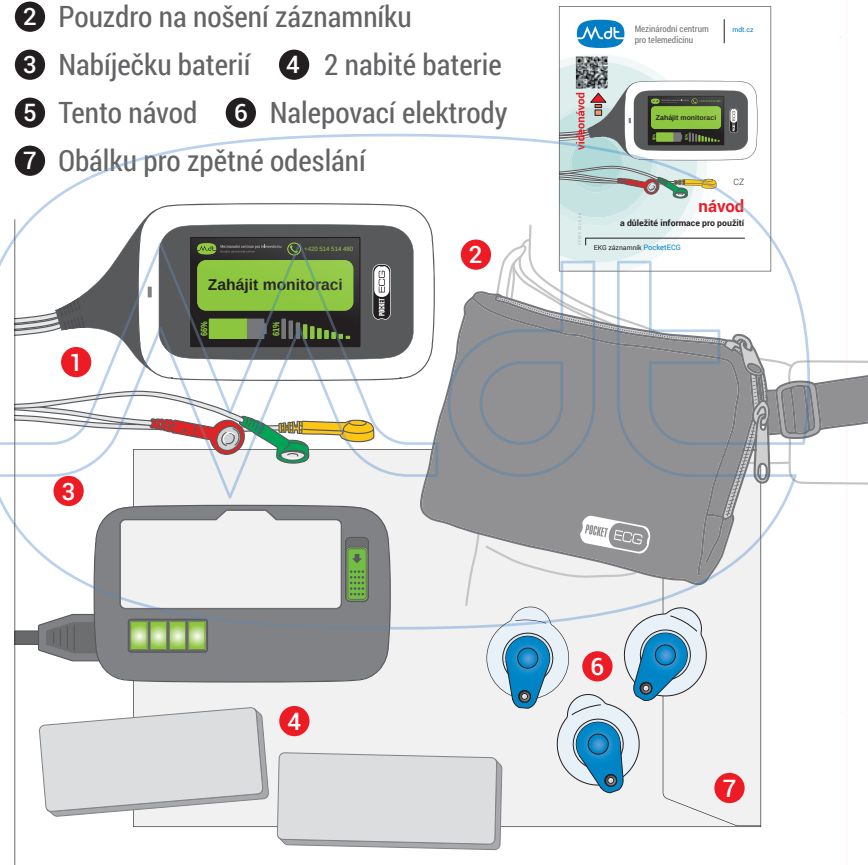

Důležitá upozornění a kontakty

Nalepovací EKG elektrody si měňte každý den.

Před hygienou odlepte EKG elektrody (patientský EKG kabel) a celý přístroj odložte. Po dokončení hygieny můžete nalepit nové EKG elektrody a opět k nim připojte patientský kabel se záznamníkem.

Při těchto úkonech není nutné nijak zasahovat do nastavení přístroje.

Pro ovládání záznamníku slouží dotykový displej.

Z důvodu šetření baterie je displej po většinu doby nahrávání vypnutý. V případě potřeby (kontrola stavu baterie/síly signálu, atd.) displej aktivujete stisknutím tlačítka PocketECG.

Výměnu baterií provádějte pravidelně 1x za 12 hodin.

1. EKG záznamník není voděodolný, nikdy záznamník nenamočte.
2. Nekoupejte se s ním ani se s ním nespřichujte!
3. Chraňte jej proti poškození!
4. Holter musí být nasazen – aktivován do 24 hodin
5. EKG monitorace není možná současně s hospitalizací či pobytem v lázních. V případě náhlé hospitalizace je nutné EKG monitoraci ukončit. EKG Holter sundejte a kontaktujte (telefonicky či emailem) MDT Centrum.

V případě potíží nás neváhejte kontaktovat na tel: **514 514 480**

Poznámka:

Pokud nemáte správně zapojené/připojené elektrody zobrazí se na displeji tato výstraha. Zkontrolujte samolepící elektrody a jejich připojení k patientskému kabelu.




Mezinárodní centrum
pro telemedicínu

mdt.cz



videonávod

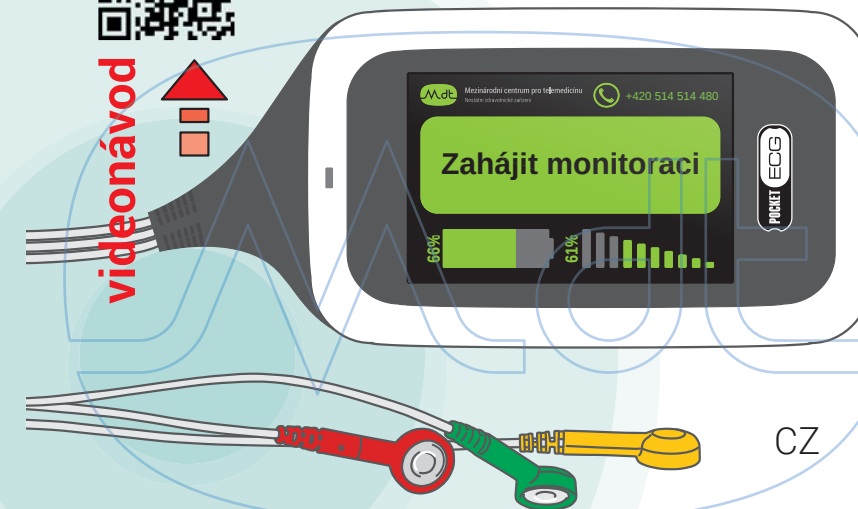


návod

a důležité informace pro použití

EKG záznamník PocketECG


VERZE 2025_06

Nalepte si na hrudník (na čistou suchou kůži) samolepící elektrody a pečlivě k nim připojte EKG kabel od záznamníku podle obrázku. Dbejte na barevné označení jednotlivých elektrod.

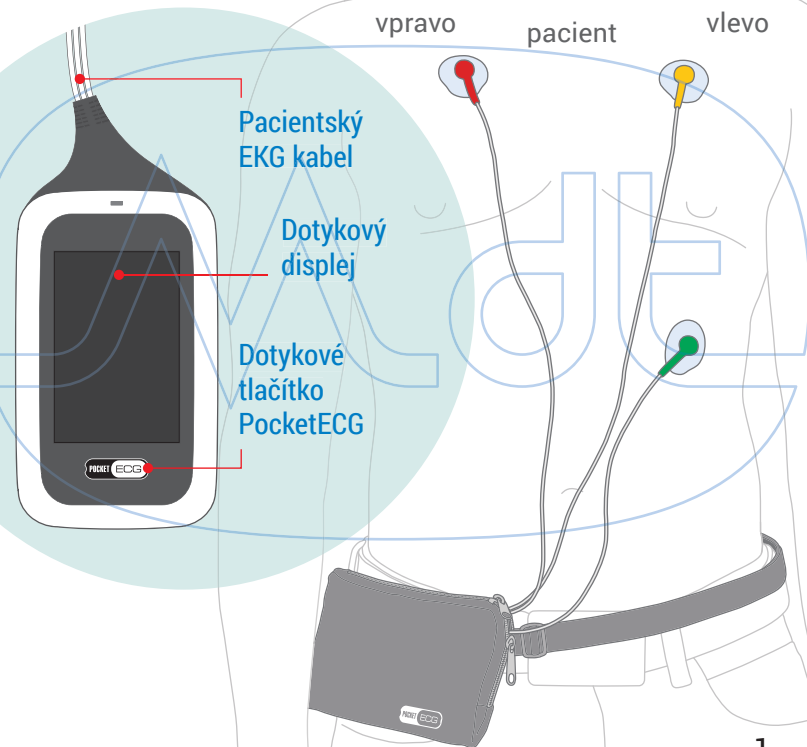

1

Před zahájením monitorace je nutné do EKG záznamníku vložit přiloženou baterii. Kryt baterie uvolníte posunutím zelené aretace podle obrázku:

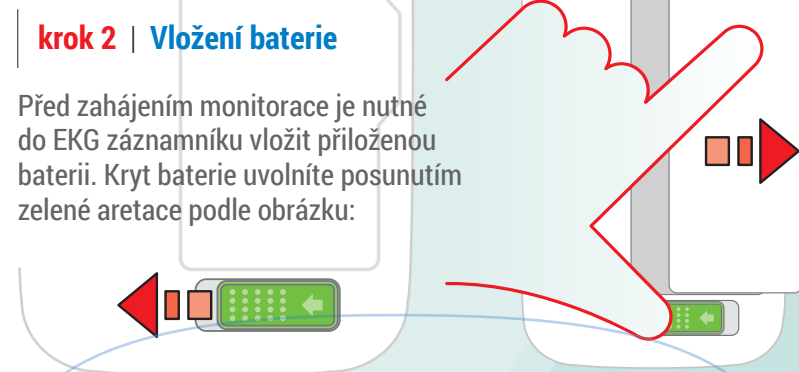

Po správném vložení baterie do přístroje se po dobu 30ti vteřin EKG záznamník automaticky zapne.

Pro zahájení měření je ale nezbytné nutné během této doby stisknout na dotykovém displeji velké zelené tlačítko „Zahájit monitoraci“



STAV BATERIE ÚROVEŇ MOBILNÍHO SIGNÁLU

Poté záznamník potvrdí zahájení měření zahráním krátké melodie a od této chvíle nepřetržitě nahrává a posílá Vaše EKG. Z důvodu šetření baterie se displej záznamníku po chvíli automaticky vypíná. V případě potřeby displej kdykoliv rozsvítíte stisknutím tlačítka PocketECG.

2

Doporučujeme každý den pravidelně ve stejný čas (ráno/večer) baterii vyměnit za druhou nabitou. Vyjmutou vybitou baterii z přístroje ihned vložte do nabíječky, aby byla připravena (dobitá) k následující zítřejší výměně baterií.

Postup při výměně baterie:

1. Posunutím aretace baterii uvolníte.
2. Vyjměte baterii ze záznamníku.
3. Zasuňte nabitou baterii dokud aretace nezaklapne zpět do své původní polohy.

Upozornění!

Výměna baterií musí proběhnout do 60 vteřin.

Po výměně baterie není nutné nijak zasahovat do nastavení přístroje.

V případě restartu/vypnutí a zapnutí monitorace pokračuje dál.

Jak nabít baterii:

Vybitou baterii vložte do přiložené nabíječky. Během nabíjení baterie bliká oranžová kontrolka. Její plné nabití signalizují všechny 4 svítící zelené kontrolky. V průměru baterie vyžaduje na plné nabití 4 hodiny.

3



Nahlásit příznaky značí, že monitorace v pořádku probíhá.

4