

Důležitá upozornění a kontakty

Pokud máte nastaveno vícedenní nahrávání, potom si před hygienou odlepte EKG elektrody a odložte přístroj. Po dokončení hygieny připevněte nové elektrody na patientský kabel se záznamníkem a nalepte na tělo.

EKG záznamník není voděodolný, vyvarujte se kontaktu s vodou.

Nekoupejte se s ním ani se s ním nespřichujte! Chraňte jej proti poškození!

V den ukončení monitorace budete kontaktován/a z telemedicínského centra (telefonicky či SMS zprávou).

Po odeslání přístroje zpět doporučujeme uschovat podací lístek.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel:

+420 514 514 480


Nabíjení záznamníku:

EKG záznamník jste obdrželi plně nabitý.

Nabijte jej vždy 1 × za 5 dní po dobu 1,5 – 2 hodiny.

Při nabíjení záznamník bliká **modře** nebo **zeleně**.

Po opětovném nasazení zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý – bliká **zelená kontrolka**.

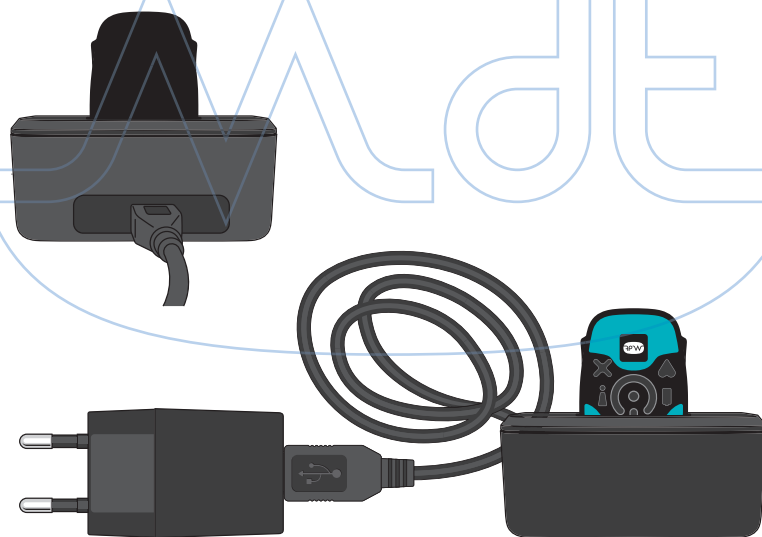

Význam barevných kontrollek záznamníku

Tlačítko **zapínání/vypínání** záznamníku



Indikátor baterie
modrá kontrolka



Indikátor zapnutí záznamníku a měření
zelená kontrolka (Pokud je záznamník zapnutý, pak tato kontrolka slabě pravidelně bliká)



Indikátor upozornění
žlutá kontrolka




Indikátor chyby
červená kontrolka



Mezinárodní centrum
pro telemedicínu

mdt.cz

CZ

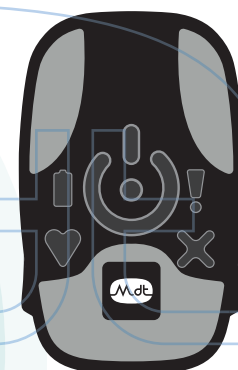

návod


a důležité informace pro použití

EKG záznamník **Faros**

Vážená paní, vážený pane,
prosím prostudujte si pečlivě tento návod.

Obdrželi jste balíček obsahující:

- 1 EKG záznamník Faros (modrý, žlutý nebo šedý)
- 2 EKG kabel
- 3 Nalepovací elektrody
- 4 Nabíječku
- 5 Tento návod
- 6 Pacientský deníček
- 7 Obálku pro zpětné odeslání a podací lístek

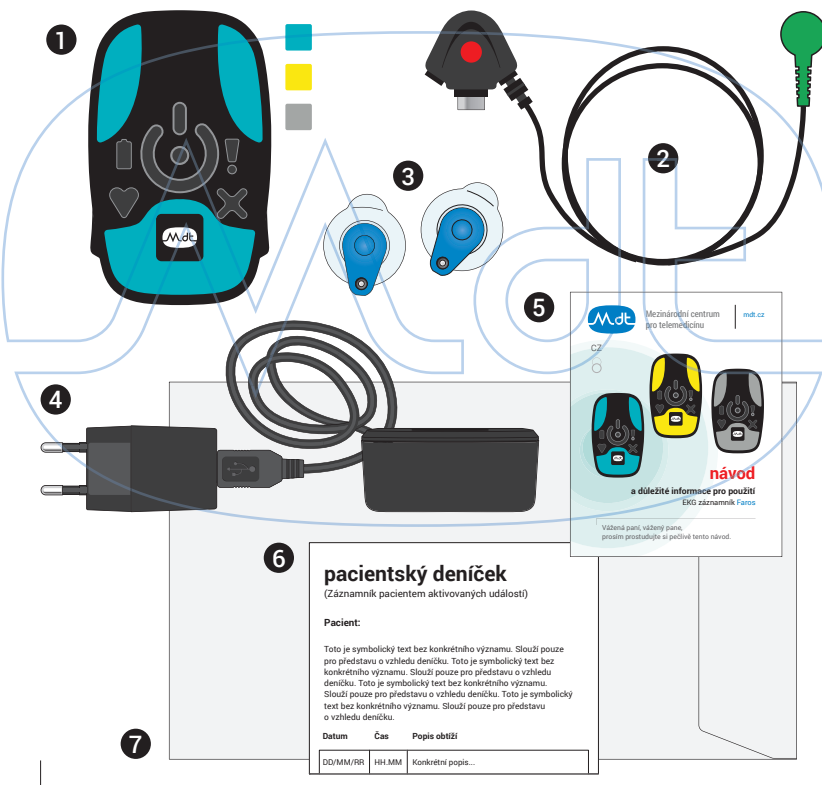


návod Nalepení elektrod – nasazení záznamníku – spuštění nahrávání – ukončení monitorace:

1 Připravte Vaši pokožku


Máte-li ochlupení v místě, kde budou nalepeny elektrody, oholte je. Pokožku očistěte mýdlem a vodou, pečlivě osušte. Nenanášejte krémy, oleje nebo parfémy. Nepoužívejte ubrousky s obsahem alkoholu. Neodírejte kůži.

2 Připevněte záznamník k EKG kabelu

Zasuňte EKG záznamník do USB konektoru EKG kabelu. Ujistěte se, že je konektor úplně zasunutý.

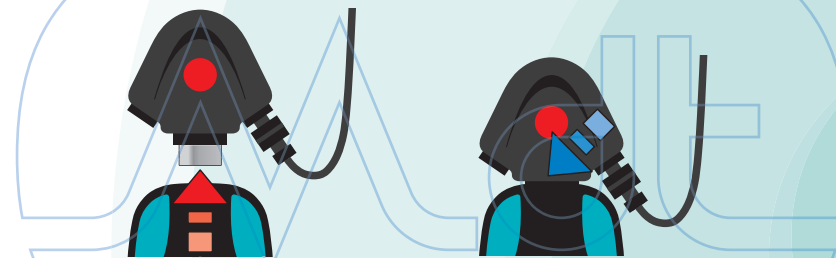

Připevněte na konce EKG kabelů nalepovací elektrody (bílé či modré, na druhu nezáleží)

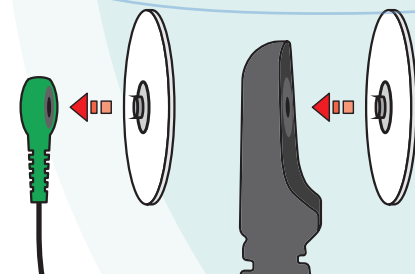


Tip:
Nejjednodušeji
Vám to půjde
na rovném povrchu,
třeba na stole.

3 Připevněte k hrudníku

Ze zadní strany elektrod (či jednorázové nálepky) odlepte ochrannou fólii a poté elektrody nalepte na hrudník podle níže uvedeného obrázku.


Poté zavolejte na naši linku +420 514 514 480.

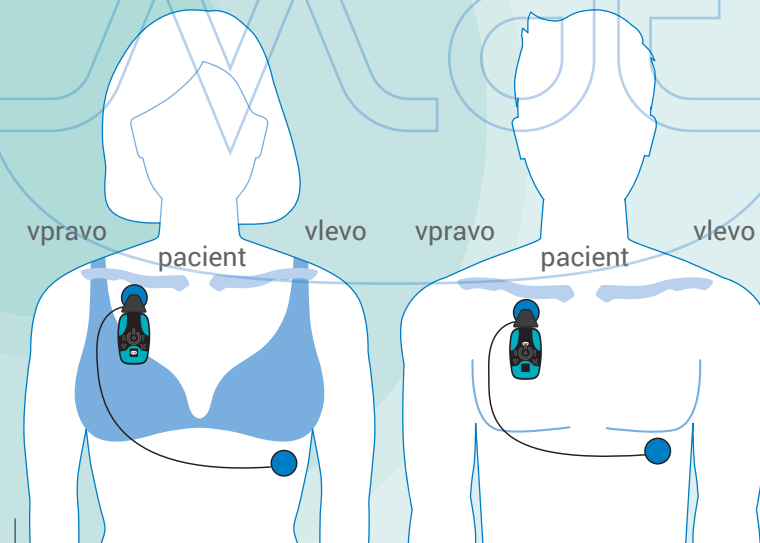

4 Spuštění nahrávání

Pro spuštění **EKG záznamníku** stiskněte krátce (maximálně po dobu tří sekund) tlačítko uprostřed záznamníku, záznamník slabě pípne a začne problikávat.


Spuštěný záznamník poznáte podle slabého blikání zelené kontrolky ve tvaru srdce. Prosím kontrolujte, zda záznamník bliká po celou dobu monitorace.

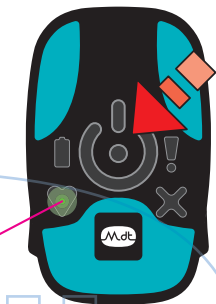

5 Ukončení monitorace

Po uplynutí doby monitorace **vypněte** záznamník a pošlete jej i s ostatními Vám zaslanými věcmi zpět v příložené obálce pro zpětné odeslání.

EKG záznamník vypnete delším stiskem (po dobu maximálně 3 sekund) tlačítka pro **zapnutí/vypnutí**, kdy 3 x pípne a přestane blikat.

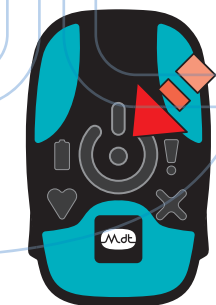

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel:

+420 514 514 480