





Vážený pane, Vážená paní,
příložený EKG záznamník je určený pro záznam
Vašeho EKG. Nahraný EKG záznam pomůže stanovit
příčinu Vašich obtíží, nebo ověří dlouhodobý efekt
zákroku, který jste podstoupil (a). To je klíčové pro
Vaši další úspěšnou léčbu.

Prostudujte si prosím pečlivě tento návod.

Obdrželi jste balíček obsahující:

- 1 EKG záznamník Faros (modrý, žlutý nebo šedý)
- 2 EKG kabel
- 3 Nalepovací elektrody
- 4 Nabíječku
- 5 Tento návod
- 6 Pacientský deníček
- 7 Obálku a podací lístek pro zpětné odeslání

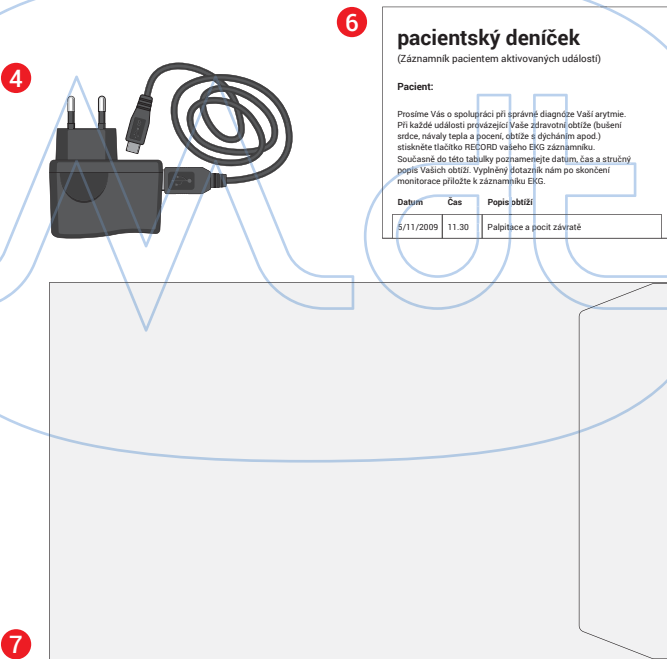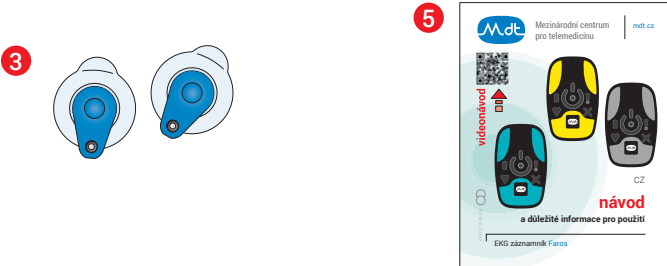

Důležitá upozornění a kontakty

Délka monitorace se odvíjí od vaší lékařské indikace. V den ukončení monitorace Vás budeme telefonicky kontaktovat z telemedicínského centra.

Ekg záznamník jste obdrželi plně nabitý. Nabíjte jej vždy 1× za 7 dnů po dobu 1,5–2 hodiny. Záznamník zůstává zapnutý i po dobu nabíjení. Po opětovném nasazení zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý – bliká zelená kontrolka.

Před hygienou odlepte EKG elektrody a odložte přístroj. Přístroj nevypínejte. Po dokončení hygieny připevněte nové elektrody na pacientský kabel se záznamníkem a nalepte na tělo.

- 1. EKG záznamník není voděodolný, nikdy záznamník nenamočte.
- 2. Nekoupejte se s ním ani se s ním nespřichujte!
- 3. Chraňte jej proti poškození!
- 4. Holter musí být nasazen – aktivován do 24 hodin
- 5. EKG monitorace není možná současně s hospitalizací či pobytem v lžních. V případě náhlé hospitalizace je nutné EKG monitoraci ukončit. EKG Holter sundejte a kontaktujte (telefonicky či emailem) MDT Centrum.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel:

514 514 480



Mezinárodní centrum
pro telemedicínu

mdt.cz



videonávod



návod
a důležité informace pro použití


EKG záznamník Faros

1 Přípravte Vaši pokožku


Máte-li ochlupení v místě, kde budou nalepeny elektrody, oholte je. Pokožku očistěte mýdlem a vodou, pečlivě osušte. Nenanášejte krémy, oleje nebo parfémy. Nepoužívejte ubrousky s obsahem alkoholu. Neodírejte kůži.

2 Připevněte záznamník k EKG kabelu


Zasuňte EKG záznamník do USB konektoru EKG kabelu. Ujistěte se, že je konektor úplně zasunutý.

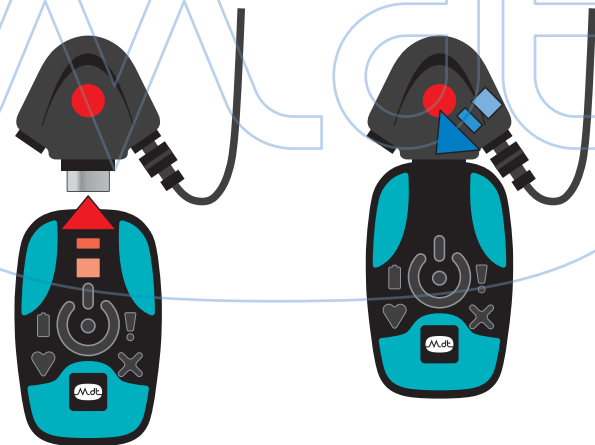

Připevněte na konce EKG kabelů a vodiče elektrody (bílé či modré, na barvě nebo druhu elektrody nezáleží)

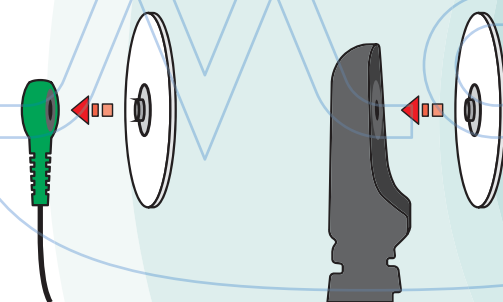

Tipy: Nejjednodušeji Vám to půjde na rovném povrchu, třeba na stole.

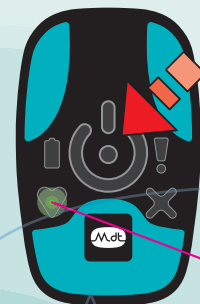3 Spuštění nahrávání

Pro spuštění **EKG záznamníku** stiskněte krátce (maximálně po dobu jedné sekundy) tlačítko uprostřed záznamníku dokud neuslyšíte slabé pípnutí.

Spuštěný záznamník poznáte podle slabého blikání zelené kontrolky ve tvaru srdce v intervalech cca 20 vteřin.



4 Připevněte k hrudníku

Ze zadní strany elektrod odlepte ochrannou fólii a poté elektrody nalepte na hrudník podle tohoto obrázku.

5 Ukončení monitorace

Po uplynutí doby monitorace vypněte záznamník a pošlete jej i s ostatními Vám zaslanými věcmi zpět v příložené obálce pro zpětné odeslání.

EKG záznamník vypnete dlouhým stiskem tlačítka dokud záznamník 3 × nezapípá.

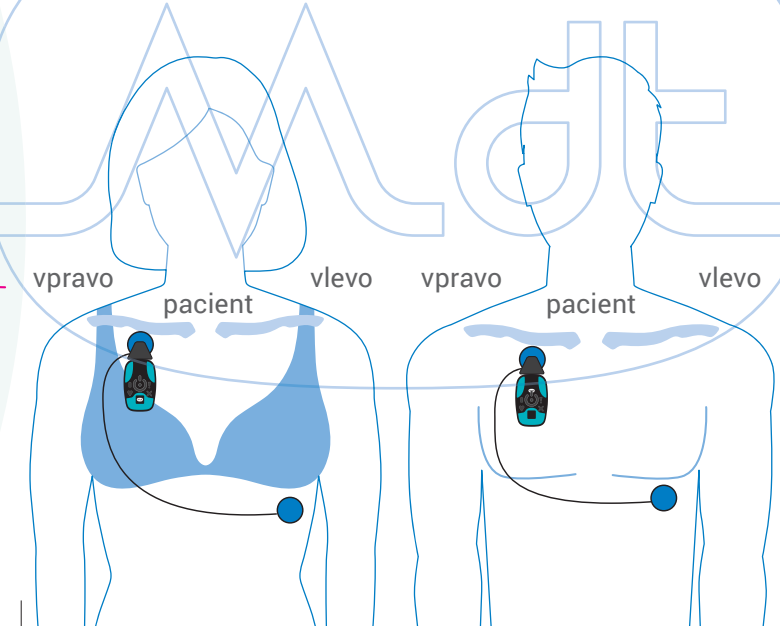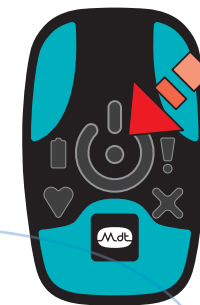**Význam barevných kontrolkek záznamníku**

Indikátor zapnutí záznamníku a měření
zelená kontrolka
(Pokud je záznamník zapnutý, pak tato kontrolka pravidelně bliká)

