




Vážený pane, Vážená paní,
Příložený EKG záznamník (EKG karta) je určený pro dlouhodobé sledování Vašeho EKG. Získané EKG záznamy pomohou stanovit příčinu Vašich obtíží, nebo ověří dlouhodobý efekt zákroku, který jste podstoupil(a). To je klíčové pro Vaši další úspěšnou léčbu.

Prostudujte si prosím pečlivě tento návod.


Od lékaře jste obdrželi balíček obsahující:

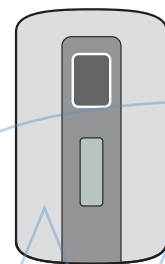

EKG kartu



Tento návod

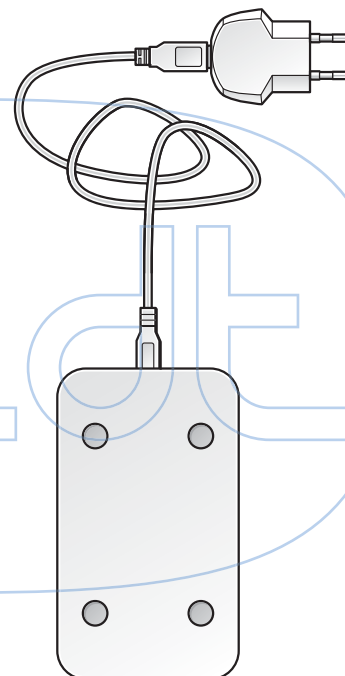

Nabíječku
(nabíjecí podložku)

Důležitá upozornění a kontakty

Přístroj není vodě odolný. Chraňte ho proti poškození!

EKG nahrávejte minimálně 1 × týdně a vždy při Vašich obtížích.

Pokud potřebujete poradit, kontaktujte nás na tel.:

514 514 480



Mezinárodní centrum
pro telemedicínu

mdt.cz



CZ

návod
a důležité informace pro použití

EKG záznamník **PhysioMem® PM 100**


Pro záznam Vašeho EKG přiložte EKG kartu doprostřed hrudi (na hrudní kost) dle obrázku a stiskněte tlačítko na přední straně karty. Tím se začne nahrávat EKG.

Aby měření probíhalo správně, nesmí být elektrody přiloženy na oblečení, ale musí mít přímý styk s kůží.

Záznam Vašeho EKG trvá 40 vteřin. Během měření karta vydává zvuk v rytmu Vaší srdeční frekvence. Z důvodu zajištění kvality EKG záznamu kartu přidržujte pevně oběma rukama v těsném kontaktu s pokožkou.

Při záznamu nemluvte a nepohybujte se!


Po skončení měření je EKG záznam automaticky odeslán lékaři.

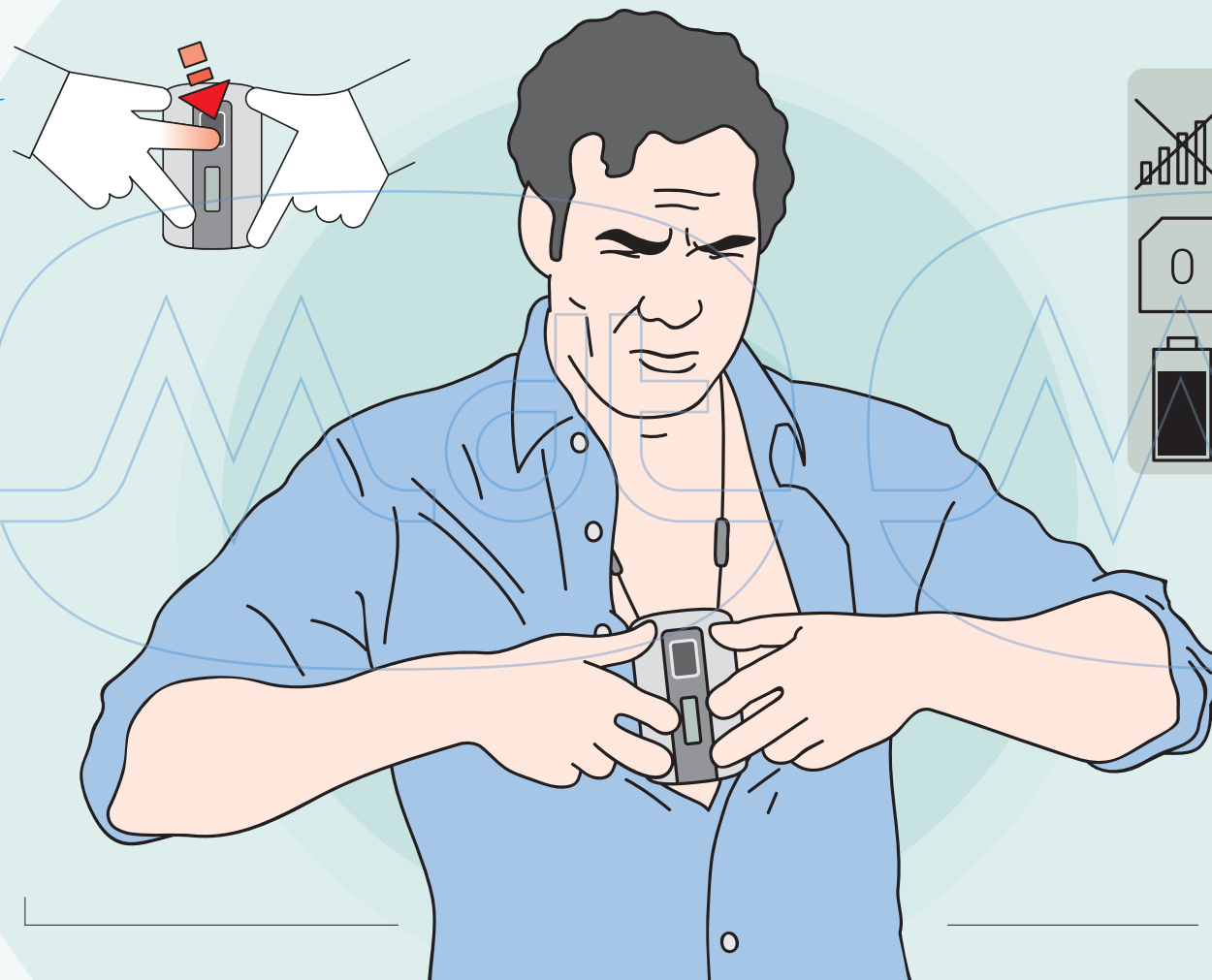

Význam symbolů na displeji



V případě že je karta vybitá (to poznáte ze spodního obrázku na displeji), je nutné kartu dobít. K tomu slouží přiložená nabíječka (nabíjecí podložka)

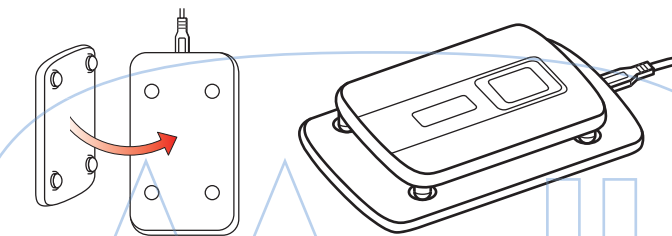

Nejdříve připojte nabíjecí podložku k napájecímu zdroji pomocí USB kabelu. Potom na ní pečlivě umístěte EKG kartu tak, aby její elektrody zapadly do otvorů na nabíjecí podložce. Po tomto přiložení na podložku se EKG karta začne automaticky nabíjet. Na nabíjecí podložce svítí během nabíjení diody: zelená a oranžová.

Zelená signalizuje připojení nabíjecí podložky k elektrické síti. Pokud svítí oranžová dioda, probíhá proces nabíjení. Až tato oranžová dioda zhasne a zelená dioda se rozblíká, karta je nabitá a připravená k použití.

