




Vážený pane, Vážená paní,
příložený EKG holter je určený pro záznam Vašeho EKG.

Nahráný EKG záznam pomůže stanovit příčinu Vašich obtíží, nebo ověří dlouhodobý efekt zákroku, který jste podstoupil(a). To je klíčové pro Vaši další úspěšnou léčbu.

Prostudujte si prosím pečlivě tento návod.

Od lékaře jste obdrželi balíček obsahující:

- 1 EKG holter s EKG kabelem
- 2 Pouzdro na EKG holter
- 3 Tento návod
- 4 Nalepovací elektrody
- 5 Mikrotužkovou baterii AAA
- 6 Obálku pro zpětné odeslání
- 7 Pacientský deníček

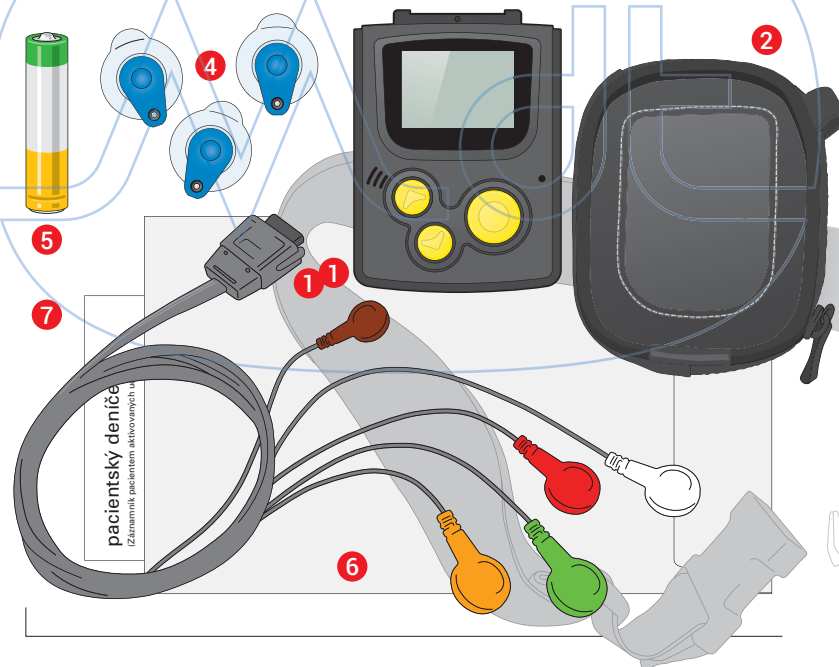

Důležitá upozornění a kontakty

V případě Vašich obtíží v průběhu nošení EKG holteru stiskněte tlačítko ENTER (symptomové tlačítko) a zapište událost – tyto potíže do deníčku.

Přístroj během nošení nesundávejte ani nijak nepřerušujte nahrávání.

Pokud máte nastaveno vícedenní nahrávání, potom si před hygienou pouze odlepte EKG elektrody a holter s kabelem odložte. Po ukončení hygieny si nalepte nové elektrody a opět k nim připojte holter s patientským kabelem.

Během nahrávání nikdy nevyndávejte baterii ani neodpojujte EKG patientský kabel od přístroje!

EKG holter není vodě odolný, nikdy se s ním nekoupejte ani nesprchujte! Chraňte jej proti poškození!

V případě potíží nás neváhejte kontaktovat na tel:


514 514 480



Mezinárodní centrum
pro telemedicínu

mdt.cz

© MDT_ 2020_V01

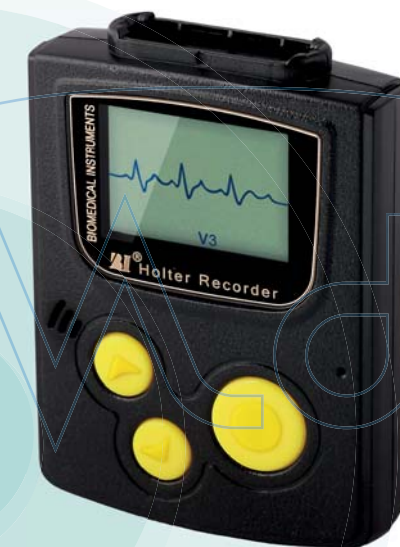


CZ

návod

a důležité informace pro použití

EKG holter BI

- 1** Nalepte si na hrudník (na čistou suchou kůži) samolepící elektrody a připojte k nim podle obrázku EKG kabel.

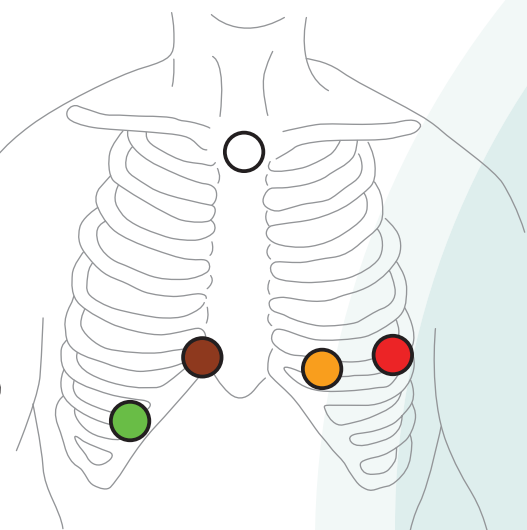

- 2** Vložte ze zadní strany EKG holteru mikrotužkovou baterii (AAA).

- 3** Pokud ještě k holteru nemáte připojený patientský kabel, zobrazí se na displeji výzva k jeho připojení.


Nenalezen patientský kabel.
Zapojte prosím patientský kabel.

- 4** V dalším kroku potvrďte Enterem volbu
>Spustit záznam<

▶ Spustit záznam ◀
Nastavení systému
Pokročilé nastavení
Informace o verzi

- 5** Na displeji se zobrazí křivka Vašeho EKG, pokračujte opětovným stiskem tlačítka **Enter**.

V případě, že se v tomto kroku na displeji objeví pouze rušení, je třeba zkontrolovat připojení elektrod dokud nevidíte EKG křivku.

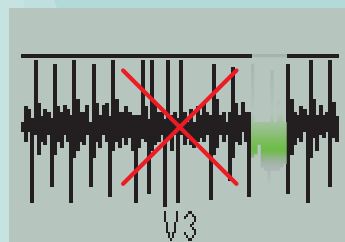

- 6** Tlačítka (**doleva/doprava**) vyberte **OK** a potvrďte **Enterem**.
Tím jste aktivovali nahrávání EKG.

Spustit záznam EKG?
OK Konec

- 7** Na displeji se zobrazí aktuální čas, který tam bude přítomný po celou dobu nahrávání. V případě Vašich obtíží během nahrávání stiskněte **1 x tlačítko Enter** (symptomové tlačítko) a запиšte tyto potíže do patientského deníčku.

aktuální datum

21-05-2018 Pondělí
Uplynulý čas: 00:00:09 NAHRÁT
16:14:30
ID:
Jméno:

uplynulý čas měření

aktuální čas

Ukončení záznamu

Po skončení nahrávání se na displeji objeví nápis „**Hotovo**“. V tom případě sundejte holter odpojením patientského kabelu od samolepících elektrod.
Nikdy od holteru neodpojujte patientský kabel ani z holteru nevynedávajte baterii!

Vše uložte do přepravního obalu a odešlete zpět v přiložené obálce či odevzdejte Vašemu lékaři.

Holter – funkce tlačítek:

